

ソマセプト




ソマレゾン



# 刺さない鍼で トリートメント

## ツボを活用して


痛みに

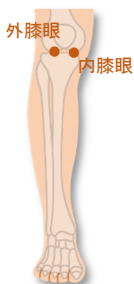

膝痛のツボ

階段の上り下りがツライ


自律神経に

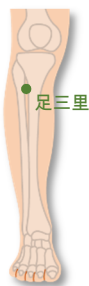

健康長寿のツボ

神経の興奮をおさえる

美容に

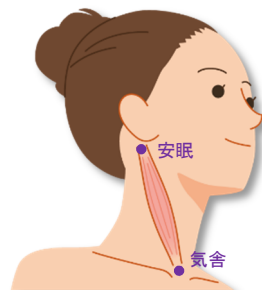

デコルテのツボ

フェイスラインを整える

## どうして効くの？

**ソマセプト**は、プラスチック製のマイクロコーンで作られた微細突起状の医療機器です。皮膚表面への刺激により軸索反射（じくさくはんしゃ）を発生させ、皮膚表面の血流が増加することによって関節の痛みや筋肉の可動痛、コリなどの緩和・改善を行います。



ソマセプトマイクロコーン拡大写真

**ソマレゾン**は、ゴムの弾力性をもつエラストマー樹脂のマイクロコーンからなる微細突起状の医療機器です。体性自律神経反射によって脊髄におけるオピオイドの放出を促し、求心性C繊維による侵害情報伝達を抑制することにより痛みを緩和をもたらします。



ソマレゾンマイクロコーン拡大写真

ソマセプトとソマレゾンのマイクロコーンの高さは、それぞれ、わずかに $150\mu\text{m}$ （ $=0.15\text{mm}$ ）と $300\mu\text{m}$ （ $=0.30\text{mm}$ ）。皮膚を傷つけないため利用しやすく、貼付することによる痛みはほとんど感じられません。安全で取り扱いやすい医療機器として設計されています。

## どうやって使うの？

ソマセプト・ソマレゾンの使い方、貼る場所選定方法には主に3つの方法があります。①圧痛点を見つけて貼る方法、②ツボに貼る方法、③筋肉の起始停止に貼る方法です。ここでは、一番目の圧痛点に貼る方法をご紹介します。②③のツボや筋肉は、インターネットや書籍などで学んでみてください。

【医療機器製造販売届出番号】

ソマセプト：22B3X10002000001

ソマレゾン：22B3X10002000002

メーカー希望小売価格

1箱10個入り：1,650円（税込）

1箱100個入り：11,000円（税込）



日理株式会社 <http://www.nichiri.com/>

東京店 東京都荒川区東日暮里6-39-15 〒116-0014 ☎03(3803)1211(代)

大阪店 大阪府東大阪市長田東2-1-11 〒577-0012 ☎06(6746)5300(代)

## ソマニクスを圧痛点に貼る方法

まず、圧痛点とは、押すと一際痛みを感じる点のことをいい、痛みやコリのある部分周辺に出やすいと言われていました。

治療家の先生方もこの圧痛点をととても大切な治療ポイントにしており、まさにあなたにとってのツボとも呼べる、究極のオーダーメイド治療と言えるでしょう。

圧痛点を探すときのコツは、少し時間をかけ、出来るだけ同じ力で押しながら一際痛い点を探すことです。

見つけにくい場合には、無理の無い範囲で痛みが出る動きや姿勢をとり、その最中に圧痛点を探すのも良い方法といえるでしょう。

強い刺激を与えることは、一時的には気持ちよさもあるかもしれませんが、筋膜を傷つける可能性がありますのでオススメできません。



## どうやって使い分けたいの？

ソマセプト	ソマレゾン
硬い素材の突起 129本	やわらかい素材の突起 177本
動かすにつらい痛みにも もまれたくない痛みにも	揉みほぐすと楽になる痛みやコリに 温めると楽になる痛みやコリに

初めて使用される方は**ソマレゾン**を使用することをおすすめします

## 使った人たちの感想は？

フルマラソンを完走したあと、ゴール地点で、ソマニクス施術を受けたランナーの皆様にご感想を伺いました。

ハムストリングスに痛みを感じていたが、ソマセプト貼付による施術後に、痛み的大幅な改善がありました。（50歳代の男性）

すねに筋緊張と痛みを感じていたが、ソマレゾン貼付による施術後に大幅な改善を感じ驚いています。（30歳代の男性）

ふくらはぎに痛みとつっぱりを感じていましたが、ソマセプト貼付によって痛みが少なくなりました。（40歳代の女性）